

Reduced Gap Deluxe Full-Length Bed Rail

Assembly, Installation and Operating Instructions



Model Nos. 6628 and 6628-TSS (extra-wide)

Yes, you can.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check all parts for shipping damage before using. In case of damage, DO NOT use the equipment. Contact the dealer/carrier for further instructions.

To ensure the safe use of the reduced gap deluxe full-length bed rail, these instructions **MUST** be followed:

⚠ WARNINGS

DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

These bed rails are intended to prevent an individual from inadvertently rolling out of bed. **DO NOT** use for restraint purposes.

ENTRAPMENT MAY OCCUR. Proper patient assessment and monitoring, and proper maintenance and use of equipment is required to reduce the risk of entrapment. Variations in bed rail dimensions, and mattress thickness, size or density could increase the risk of entrapment. Visit the FDA website at <http://www.fda.gov> to learn about the risks of entrapment. Review **A Guide to Bed Safety**, published by the Hospital Bed Safety Workgroup, located at www.invacare.com. Use the link located under each bed rail product entry to access this bed safety guide.

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Although bed rails are not rated to any specific weight limitation, the bed rails may become deformed or broken if excessive side pressure is exerted on the bed rails. This bed rail is not an assist rail for getting into or out of bed. **DO NOT** use the bed rails as push handles when moving the bed.

After any adjustments, repair or service and before use, make sure all attaching hardware is tightened securely. Bed rails with dimensions different from the original equipment supplied or specified by the bed manufacturer may not be interchangeable and may result in entrapment or other injury.

For more information regarding Invacare products, parts, and services,
please visit www.invacare.com

⚠ WARNING

On 6628 rail only, one crossbrace MUST be positioned between the sixth and seventh springs at the head end of the bed. The remaining crossbrace MUST be positioned between the second and third springs at the foot end of the bed. On 6628-TSS rail only, one crossbrace MUST be positioned between the fifth and sixth springs at the head end of the bed. The remaining crossbrace MUST be positioned between the second and third springs at the foot end of the bed. Otherwise, either the bed rail or the bed may be damaged when the head end and/or foot end are raised.

To ensure proper bed rail installation, arrows on crossbrace decal MUST point to center of bed.

The outer telescoping tube of the bed rail MUST be positioned at the head end of the bed to prevent a pinch point when raising/lowering bed.

To reduce the risk of entrapment, make certain that the crossbraces DO NOT exceed the width of the mattress. Mattress MUST fit bed frame and bed rails snugly to reduce the risk of entrapment.

Model 6628-TSS is designed and intended for use with powered air mattresses only. To reduce the risk of entrapment, model 6628-TSS must only be used with powered air mattresses.

Unless the bed rail is in the lowest position, ensure that the plunger pin fully protrudes through the same respective adjustment hole of each bed rail tube. This ensures that the bed rail is securely locked in position and an even height adjustment is achieved. (The lowest position for the bed rail occurs when the bed rail rests against the bed rail stop. Spring loaded pins DO NOT engage into an adjustment hole when the bed rail in the lowest position.)

Install bed rails fully extended on bed. DO NOT use full length bed rails as half rails.

Installing the Crossbraces

NOTE: READ AND UNDERSTAND WARNINGS before proceeding with procedure.

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1 on page 4.

1. Remove the mattress from the bed.
2. Perform one of the following:
 - On 6628 Rails - Place the bed in the flat position and position one crossbrace between the sixth and seventh springs at the head end of the bed frame (Detail "A").

NOTE: If the bed frame contains BLACK springs at the sixth and seventh spring locations at the head end of the bed, position the crossbrace between these springs.

- On 6628-TSS Rails - Place the bed in the flat position and position one crossbrace between the fifth and sixth springs at the head end of the bed frame (Detail "A").

-
3. When holding either end of the crossbrace assembly, turn the barrels so plunger knobs are on top (Detail "A").

NOTE: Ensure the long end of the barrel faces the center of the bed with the decal to the center of bed as shown in FIGURE 1 on page 4. If long end faces the opposite way, rotate crossbrace 180°.

4. Position the bed hooks so they are on the bottom side of the crossbrace (Detail "B").
5. Perform one of the following:
 - Standard Hardware Installation - Perform the following steps:
 - i. Attach one bed hook onto the bed spring angle iron and push in on the spring loaded bed rail until you are able to attach the opposite end to the bed spring angle iron (Detail "B").
 - ii. Rotate the barrel so that the long ends face down (Detail "B").

NOTE: Ensure plunger pins are facing the center of the bed.

- Optional Hardware Installation - Perform the following steps:
 - i. Attach wingnuts to bed hooks.
 - ii. Tighten until the wingnut reaches the bed spring angle iron.
 - iii. Rotate the barrel so that the long ends face down.
6. Visually inspect crossbrace to confirm proper orientation.
 7. Position the remaining crossbrace between the second and third springs at the foot end of the bed.

NOTE: If the bed frame contains BLACK springs at the second and third spring locations at the foot end of the bed, position the crossbrace between these springs.

8. Repeat STEPS 3-7 for the foot end crossbrace.
9. Place mattress on bed frame.
10. Install the bed rails. Refer to [Installing the Bed Rails](#) on page 4.

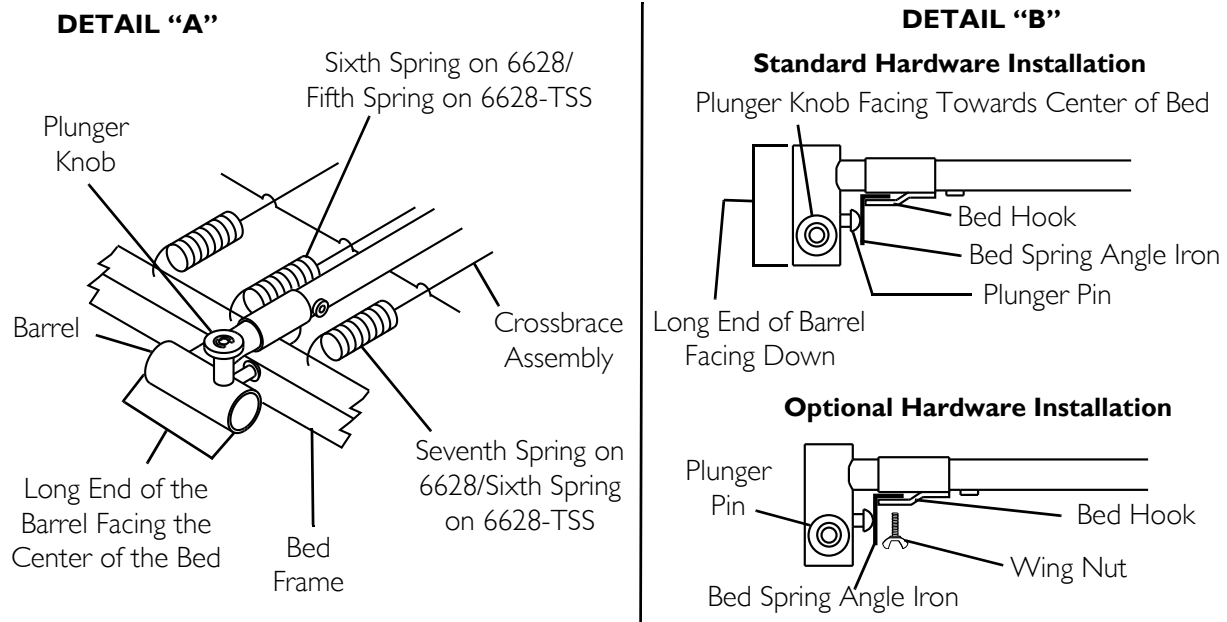


FIGURE 1 Installing the Crossbraces

Installing the Bed Rails

⚠ WARNING


The outer telescoping tube of the bed rail **MUST be positioned at the head end of the bed to prevent a pinch point when raising/lowering bed.**

NOTE: READ AND UNDERSTAND WARNINGS before proceeding with procedure.

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 2.

1. Extend one bed rail to reach the head end and foot end crossbraces.
2. Insert the outer telescoping tube of the bed rail into the barrel of the head end crossbrace.
3. Pull and hold the plunger knob on the barrel while lowering the bed rail.
4. Release the plunger knob on the barrel.
5. Raise or lower the bed rail until the plunger pin clicks securely into the adjustment hole or until the rail stop securely rests against the barrel.
6. Insert the inner telescoping tube of the bed rail into the barrel of the foot end crossbrace.
7. Repeat STEPS 3-5 for the inner telescoping tube of the bed rail, adjusting the bed rail to the position reached in STEP 5.
8. Repeat STEPS 1-7 to install the remaining bed rail.

WARNING
Patient entrapment with bed side rails may cause injury or death. Mattress must fit bed frame and side rails snugly to prevent patient entrapment. Follow the manufacturer's instructions. Monitor patient frequently. Read and understand the Owner's/Operator's Manual prior to using this equipment. Manual is available at www.invacare.com or your dealer. PIN 1100183 Rev A - 1104

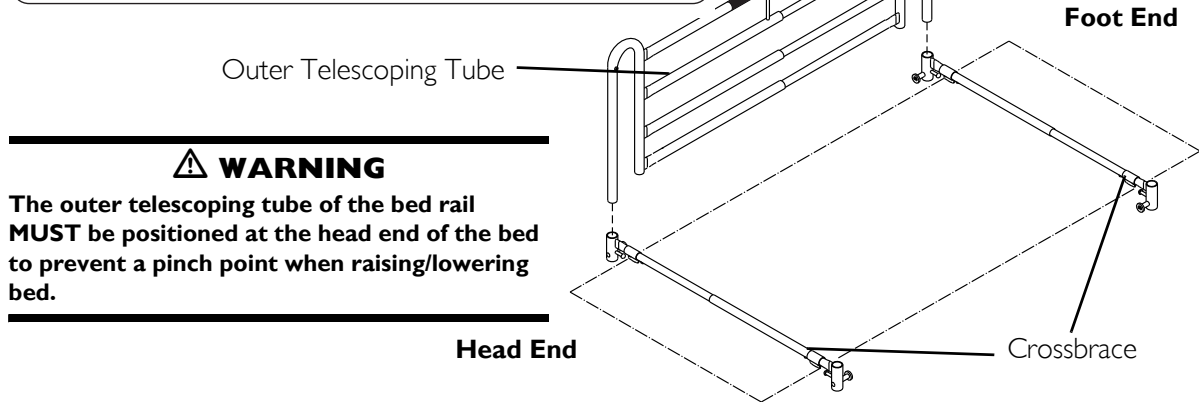

WARNING
The outer telescoping tube of the bed rail **MUST** be positioned at the head end of the bed to prevent a pinch point when raising/lowering bed.

FIGURE 2 Installing the Bed Rails

Operating Instructions

NOTE: READ AND UNDERSTAND WARNINGS before proceeding with procedure.

Lowering/Raising the Bed Rail

1. Hold bed rail while pulling the plunger pin.
2. Lower/raise bed rail.
3. Release plunger pin and lower/raise the bed rail until plunger pin clicks into position unless bed rail is at lowest position.

NOTE: The lowest position for the bed rail is when the bed rail rests against the bed rail stop. Spring loaded pins DO NOT have an adjustment hole to engage into when the bed rail in the lowest position.

4. Repeat STEPS 1-3 for opposite end of bed rail.

NOTE: Ensure head end and foot end of bed rails are adjusted to the same height.

LIMITED WARRANTY

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser who purchases this product when new and unused from Invacare or a dealer. This warranty is not extended to any other person or entity and is not transferable or assignable to any subsequent purchaser or owner. Coverage under this warranty will end upon any such subsequent sale or other transfer of title to any other person.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for one year for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover, provide dealer's name, address, and the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number. Do not return products to our factory without our prior consent.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED, PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE, PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE, OR TO A PRODUCT DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL, AND SUCH EVALUATION WILL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE. THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO NORMAL WEAR AND TEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE PRODUCT INSTRUCTIONS.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, OR LIMITATION OF HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

Côté de lit pleine longueur de luxe à espace mort réduit



Instructions de montage, d'installation et d'utilisation

Yes, you can.

N° des modèles 6628 et 6628-TSS (extra-large)

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

REMARQUE : Vérifier toutes les pièces avant l'utilisation pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées durant le transport. Si un dommage est constaté, ne pas utiliser l'équipement. Contacter le distributeur/transporteur pour obtenir d'autres instructions.

Pour garantir une utilisation sans danger du côté de lit pleine longueur de luxe à espace mort réduit, ces instructions DOIVENT être respectées:

⚠ MISES EN GARDE

NE PAS utiliser cet équipement ni aucune de ses options sans avoir au préalable lu et bien compris ces instructions ainsi que la documentation supplémentaire telle que les manuels de l'utilisateur, les manuels d'entretien ou les fiches de mode d'emploi fournies avec ce produit ou avec ses options. Si l'utilisateur ne comprend pas bien les mises en garde, les avertissements ou les instructions, il doit contacter un professionnel de la santé, le distributeur ou le personnel technique avant de tenter d'utiliser cet équipement pour éviter de se blesser ou d'endommager le matériel.

Ces côtés de lit sont destinés à empêcher le patient de tomber accidentellement en roulant hors du lit. **NE PAS** les utiliser pour restreindre les mouvements.

RISQUE DE PIÉGEAGE. La surveillance et l'évaluation appropriées du patient, et la maintenance et l'utilisation appropriées de l'équipement doivent être mises en œuvre pour limiter le risque de piégeage. Les variations de dimensions des côtés de lit, et l'épaisseur, la taille ou la densité du matelas sont susceptibles d'accroître le risque de piégeage. Visiter le site Web de la Food and Drug Administration (FDA) <http://www.fda.gov> pour en savoir plus sur les risques de piégeage. Lire **A Guide to Bed Safety (Guide de sécurité des lits)**, publié par le comité sur la sécurité des lits médicaux (Hospital Bed Safety Workgroup) dans le site www.invacare.com. Utiliser le lien situé sous chaque référence de côté de lit pour accéder au guide sur la sécurité des lits correspondant.

Les produits Invacare sont spécialement conçus et fabriqués pour être utilisés conjointement avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Invacare et leur utilisation n'est pas recommandée avec les produits Invacare.

Même si les côtés de lit ne sont pas dimensionnés en fonction d'une limitation pondérale spécifique, ils sont susceptibles de se déformer ou de se briser si une pression latérale excessive est exercée contre eux. Ce côté de lit n'est pas une rampe de lit permettant d'assister la montée et la descente du lit. **NE PAS** utiliser les côtés de lit en guise de poignées pour bouger le lit en vue de le déplacer.

Visiter le site www.invacare.com pour plus d'informations sur les produits, pièces et services Invacare.

⚠ MISES EN GARDE

Si l'on effectue des réglages, des réparations ou des travaux d'entretien avant d'utiliser ce côté de lit, s'assurer que toute la visserie est solidement fixée. Les côtés de lit dont les dimensions sont différentes de celles du matériel d'origine ou des spécifications du fabricant du lit ne sont pas toujours interchangeables et peuvent provoquer un piégeage du patient ou d'autres blessures.

Sur le côté de lit 6628 uniquement, un croisillon **DOIT** être positionné entre les sixième et septième ressorts en tête de lit. Le croisillon restant **DOIT** être positionné entre les deuxième et troisième ressorts en pied de lit. Sur le côté de lit 6628-TSS uniquement, un croisillon **DOIT** être positionné entre les cinquième et sixième ressorts en tête de lit. Le croisillon restant **DOIT** être positionné entre les deuxième et troisième ressorts en pied de lit. Sinon, le côté de lit ou le lit risque d'être endommagé au moment de soulever le pied et/ou la tête du lit.

Pour assurer une bonne installation des côtés de lit, les flèches sur la décalcomanie du croisillon **DOIVENT** pointer vers le centre du lit.

Le tube télescopique extérieur du côté de lit **DOIT** être positionné en tête de lit pour empêcher la formation d'un point de pincement au moment de soulever ou d'abaisser le lit.

Pour réduire le risque de piégeage, vérifier que les croisillons **NE** dépassent **PAS** la largeur du matelas. Le matelas **DOIT** s'ajuster étroitement au cadre du lit et aux côtés de lit pour réduire le risque de piégeage.

De par sa conception, l'utilisation du modèle 6628-TSS est uniquement dédiée avec les matelas pneumatiques sur lits électriques. Le modèle 6628-TSS ne doit être utilisé qu'avec les matelas pneumatiques sur lits électriques pour éviter le risque de piégeage.

Si le côté de lit n'est pas sur sa position la plus basse, le poussoir doit sortir entièrement du même trou de réglage respectif sur chaque tube de côté de lit afin de garantir que le côté de lit est solidement verrouillé en place, et que sa hauteur est réglée de façon homogène. (La position la plus basse du côté de lit est obtenue en le faisant reposer contre sa butée. Les tiges à ressort **NE** s'engagent **PAS** dans un trou de réglage lorsque le côté de lit est dans sa position la plus basse.)

Poser les côtés de lit en pleine extension sur le lit. **NE PAS** utiliser de côté de lit pleine longueur en tant que côté de lit demi-longueur.

Installation des croisillons

REMARQUE : LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES MISES EN GARDE avant de suivre la procédure.

REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à FIGURE 1 de la page 10.

1. Retirer le matelas du lit.
2. Effectuer l'une des opérations suivantes:
 - Pour les barrières 6628 – Placer le lit en position horizontale et placer un croisillon entre les sixième et septième ressorts en tête du cadre de lit (Détail « A »).

REMARQUE : Si les ressorts des sixième et septième positions côté tête de lit du CADRE DE LIT sont NOIRS, placer le croisillon entre ces ressorts.

-
- Pour les barrières 6628-TSS – Placer le lit en position horizontale et placer un croisillon entre les cinquième et sixième ressorts en tête du cadre de lit (Détail « A »).
3. En tenant une extrémité du croisillon, tourner les cylindres de façon à positionner les boutons des tiges sur le haut (Détail « A »).
REMARQUE : Veiller à orienter le côté long du cylindre vers le centre du lit, avec la décalcomanie vers le centre du lit conformément à la figure présentée en page 3. Si le côté long est orienté dans l'autre sens, tourner le croisillon à 180°.
 4. Positionner les crochets du lit sur la partie inférieure du croisillon (Détail « B »).
 5. Effectuer l'une des opérations suivantes:
 - Installation du matériel standard - Effectuer les étapes suivantes:
 - i. Fixer un crochet de lit sur la cornière du sommier et pousser sur le côté de lit à ressort de façon à fixer le côté opposé à la cornière du sommier (Détail « B »).
 - ii. Faire pivoter le cylindre afin d'orienter les côtés longs vers le bas (Détail « B »).
 - Installation du matériel optionnel - Effectuer les étapes suivantes:
 - i. Fixer les écrous papillons aux crochets du lit.
 - ii. Serrer jusqu'à ce que les écrous papillons atteignent la cornière du sommier.
 - iii. Faire pivoter le cylindre afin d'orienter les côtés longs vers le bas.
 6. Inspecter visuellement le croisillon pour confirmer sa bonne orientation.
 7. Positionner le croisillon restant entre les deuxième et troisième ressorts en pied de lit.
REMARQUE : Si les ressorts des deuxième et troisième positions côté pied du CADRE DE LIT sont NOIRS, placer le croisillon entre ces ressorts.
 8. Répéter les ÉTAPES 3 à 7 pour le croisillon en pied de lit.
 9. Poser le matelas sur le cadre.
 10. Installer les côtés de lit. Se référer à Installation des côtés de lit de la page 10.

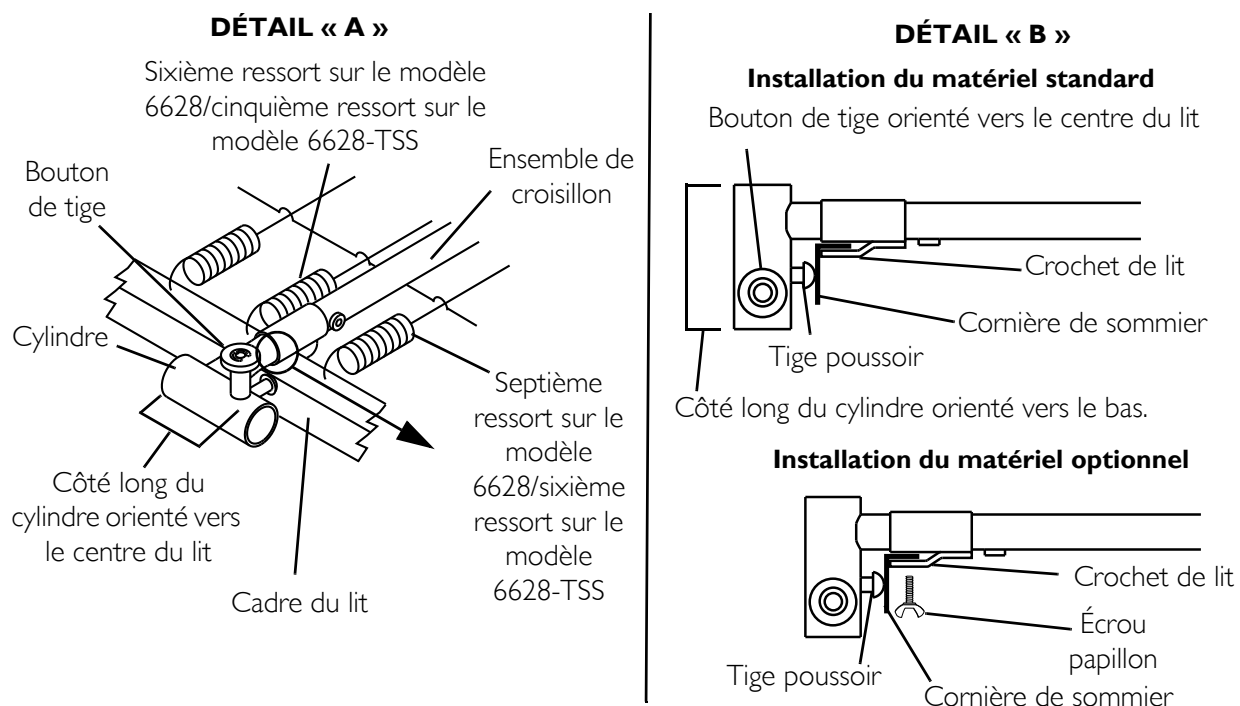


FIGURE 1 Installation des croisillons

Installation des côtés de lit

⚠ MISE EN GARDE

Le tube télescopique extérieur du côté de lit DOIT être positionné en tête de lit pour empêcher la formation d'un point de pincement au moment de soulever ou d'abaisser le lit.

REMARQUE : LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES MISES EN GARDE avant de suivre la procédure.

REMARQUE : Pour cette procédure, se reporter à FIGURE 2 de la page 11.

1. Allonger un côté de lit jusqu'aux croisillons en pied et en tête de lit.
2. Insérer le tube télescopique extérieur du côté de lit dans le cylindre du croisillon en tête de lit.
3. Tirer en maintenant le bouton de la tige sur le cylindre, tout en abaissant le côté de lit.
4. Relâcher le bouton de la tige sur le cylindre.
5. Soulever ou abaisser le côté de lit de façon à encliqueter la tige poussoir dans le trou de réglage, ou jusqu'à l'arrivée en butée du côté de lit contre le cylindre.
6. Insérer le tube télescopique intérieur du côté de lit dans le cylindre du croisillon en pied de lit.
7. Répéter les ÉTAPES 3 à 5 pour le tube télescopique intérieur du côté de lit, en réglant celui-ci sur la position atteinte lors de l'ÉTAPE 5.
8. Répéter les ÉTAPES 1 à 7 pour installer le côté de lit restant.

MISE EN GARDE
Le coincement du patient dans l'espace entre les côtés de lit peut causer des blessures ou la mort. Le matelas doit être ajusté au cadre et aux côtés du lit afin d'empêcher que le patient reste coincé. Conformez-vous aux directives du fabricant. Surveillez fréquemment le patient. Lisez et assurez-vous de bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet équipement. Le manuel en question est accessible à www.invacare.com ou chez votre détaillant.
P/N 1148181 Rev A - 04/17/06

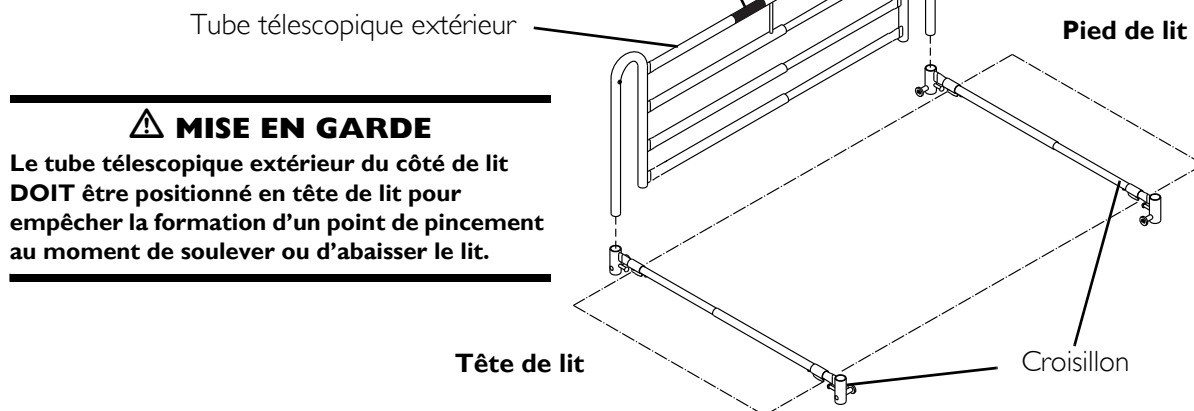


FIGURE 2 Installation des côtés de lit

Consignes d'utilisation

REMARQUE : LIRE ET BIEN COMPRENDRE LES MISES EN GARDE avant de procéder.

Abaisser/soulever le côté de lit

1. Tenir le côté de lit tout en tirant sur la tige poussoir.
2. Abaisser/soulever le côté de lit.
3. Relâcher la tige poussoir et abaisser/soulever le côté de lit de façon à entendre le dé clic de la tige poussoir qui s'enclenche, sauf si le côté de lit est sur sa position la plus basse.

REMARQUE : La position la plus basse du côté de lit est obtenue en le faisant reposer contre sa butée. Les tiges à ressort NE S'ENGAGENT PAS dans un trou de réglage lorsque le côté de lit est dans sa position la plus basse.

4. Répéter les ÉTAPES 1 à 3 pour le côté opposé du côté de lit.

REMARQUE : Veiller à régler les barrières en tête de lit et en pied de lit à la même hauteur.

GARANTIE LIMITÉE

REMARQUE : LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ ÉLABORÉE CONFORMÉMENT AUX LOIS FÉDÉRALES AMÉRICAINES APPLICABLES POUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial qui s'est procuré ce produit neuf et inutilisé auprès de Invacare ou de l'un de ses distributeurs. Cette garantie ne s'étend pas à une autre personne ou entité et n'est ni transférable, ni assignable à un éventuel racheteur ou nouveau propriétaire. La couverture de cette garantie prend fin lors de la revente ou du transfert de propriété du produit à un tiers.

La présente garantie vous confère certains droits : la législation du pays ou de la juridiction de l'acheteur initial/utilisateur final peut vous en accorder d'autres.

Invacare garantit ce produit contre les vices de fabrication et de main d'oeuvre auprès de l'acheteur initial pendant une période d'un an. Si ledit produit s'avère défectueux pendant cette période, il sera réparé ou remplacé au choix d'Invacare. Cette garantie n'inclut pas les frais de livraison ou de main d'œuvre résultant de l'installation de pièces de rechange ou de la réparation dudit produit. La seule obligation exclusive d'Invacare et le seul recours exclusif du bénéficiaire de la garantie se limitera auxdites réparations et/ou remplacements.

Pour un service au titre de la garantie, l'acheteur doit contacter le distributeur auprès duquel il a acheté le produit Invacare. Si l'acheteur ne juge pas le service de garantie satisfaisant, il doit écrire directement à Invacare à l'adresse figurant au dos. Fournir le nom du distributeur, l'adresse, le numéro du modèle, la date d'achat, indiquer la nature du défaut et le numéro du produit si celui-ci est numéroté en série. Ne pas retourner de produit à notre usine sans autorisation préalable.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PRODUITS NUMÉROTÉS EN SÉRIE SI LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ SUPPRIMÉ OU OBLITÉRÉ ; LES PRODUITS SOUMIS À UNE NÉGLIGENCE, À DES ACCIDENTS, À UNE UTILISATION, MAINTENANCE OU ENTREPOSAGE IMPROPRE ; OU LES PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER : LES MODIFICATIONS IMPLIQUANT L'UTILISATION DE PIÈCES OU D'ACCESSOIRES NON AUTORISÉS ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS SUITE À DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR UN COMPOSANT QUELCONQUE SANS LE CONSENTEMENT FORMEL D'INVACARE ; LES PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES ÉCHAPPANT AU CONTRÔLE D'INVACARE ; LES PRODUITS RÉPARÉS PAR TOUTE AUTRE PERSONNE QU'UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ PAR INVACARE, DONT L'ÉVALUATION SERA EXCLUSIVEMENT DÉTERMINÉE PAR INVACARE. LA GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS AUX PROBLÈMES RÉSULTANT DE L'USURE NORMALE OU DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-JOINTES.

LA GARANTIE EXPRESSE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, ET LE SEUL RECOURS AUX VIOLATIONS D'UNE GARANTIE SERA LIMITÉ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PRODUITS DÉFECTUEUX, CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS ÉNONCÉES DANS LES PRÉSENTES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE SERA PAS PROROGÉE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE DANS LES PRÉSENTES. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS.

CERTAINS ÉTATS INTERDISENT L'EXCLUSION OU LA LIMITATION RELATIVE AUX DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS OU RELATIVE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ; L'EXCLUSION ÉNONCÉE CI-DESSUS N'EST DONC PAS TOUJOURS APPLICABLE. CETTE GARANTIE SERA CONSENTIE EN CONFORMITÉ AVEC LES LOIS PROVINCIALES OU DES ÉTATS ET LEURS EXIGENCES.

Invacare Corporation www.invacare.com



Yes, you can.

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E
Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

© 2010 Invacare Corporation. All rights reserved.
Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.
© 2010 Invacare Corporation

Part No 00077x079

Rev K - 7/10

